

# iFill - Frei durchatmen

Bei Drive DeVilbiss International sind wir der festen Überzeugung, dass ein Mensch in seinem täglichen Leben nicht eingeschränkt werden darf, nur weil er zusätzlichen Sauerstoff benötigt.

Der iFill erlaubt Ihnen die Kontrolle über Ihren ganz persönlichen ambulanten Sauerstoffbedarf und schenkt Ihnen ein Stück Unabhängigkeit im Alltag.

## Passt sich Ihren Bedürfnissen an

Der iFill gewährt eine unbegrenzte Versorgung mit nachfüllbarem Sauerstoff. Während Sie Ihrem gewohnten Tagesablauf nachgehen, werden Sie mit der verordneten Menge an Sauerstoff versorgt.

## iFill liefert die richtige Sauerstoffmenge

Sauerstoffversorgung mit PD1000

## TECHNISCHE DATEN

### Abmessungen

(H x B x T) 72,5 x 57,0 x 31,0 cm

Gewicht 30,0 kg

### Betriebs-

spannung 230 V, 50 Hz, 1,7 Amp

### Sauerstoff-


konzentration 93 % ± 3 %

### Flaschen-

fülldruck 138 bar ± 13,8 bar

### Hilfsmittel-

verzeichnis-Nr. 14.24.04.2003

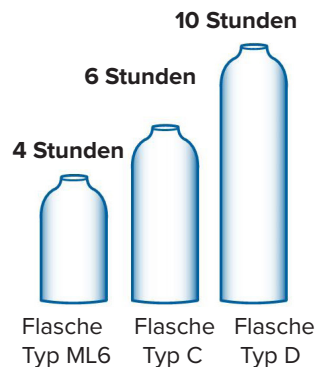

Flasche Typ ML6    Flasche Typ C    Flasche Typ D

Typ	ML6	C	D
Inhalt (Liter)	1,20	1,80	2,90
Gewicht (kg)	2,18	2,54	3,27
Füllzeit (min.) <sup>1)</sup>	90	130	215
Nutzung (Stunden) <sup>1)</sup>			
PD1000 (2 l/min.) <sup>2)</sup>	4,3	6,1	10,5
Cont. Flow (2 l/min.) <sup>2)</sup>	1,4	2,0	3,5

Sie können die Sauerstoffmenge durch Wahl der passenden Flaschengröße ganz einfach an Ihren aktuellen Bedarf anpassen. So liefert z.B. die 1,2 Liter Flasche des Typs ML6 Sauerstoff für durchschnittlich 4 Stunden, wenn sie mit dem Drive DeVilbiss International Sauerstoff-Sparsystem PD1000 ausgestattet ist. Die Füllzeit der Flasche beträgt ca. 90 Minuten. Geht der tägliche Bedarf an Sauerstoff darüber hinaus, bietet sich Flaschengröße C oder D an: Diese gewährleisten eine Sauerstoffversorgung für 6 bzw. 10 Stunden (in gepulstem



Adapter für unterschiedliche Flaschengrößen

### Sichere und einfache Befüllung

Die iFill Füllstation zeichnet sich insbesondere durch eine hohe Benutzerfreundlichkeit aus. Es sind nur wenige Handgriffe erforderlich, um eine Sauerstoffflasche zu befüllen. Hierzu die Flasche auflegen, mit einem einfachen „Klick“ sicher mit der iFill-Füllstation verbinden und das Gerät einschalten. Eine grüne Kontrolllampe leuchtet auf, wenn die Flasche komplett gefüllt ist. Ihre Sauerstoffflaschen werden schnell, sicher und bequem bei Ihnen zuhause gefüllt.

### Aufstellen der iFill Sauerstoff-Füllstation

Der iFill ist ein eigenständig funktionierendes Gerät. Es arbeitet unabhängig von einem Konzentrator und dient als zusätzliche Sauerstoffquelle. Die Füllstation kann in jedem beliebigen Raum aufgestellt und betrieben werden.



Einfacher Schnellverschluss



Einfache Bedienungsfläche

### Fortschrittliche PulseDose-Technologie

Mit der Entwicklung eines der ersten intelligenten Sauerstoff-Sparsysteme hat Drive DeVilbiss

International Pionierarbeit auf diesem Gebiet geleistet. Das PulseDose-System PD1000 verlängert die Nutzungsdauer einer Sauerstoffflasche erheblich, indem es nur dann Sauerstoff abgibt, wenn dieser benötigt wird. Wir sind deshalb der festen Überzeugung, dass das Sparsystem PD1000 für Sie genau die richtige Wahl ist.



### Ihr Vorteil als Patient:

- Vielfältig - verschiedene Flaschengrößen für jeden Bedarf
- Praktisch - kann überall im Haus platziert werden
- Einfach - benutzerfreundlich, zuverlässig und sicher
- Ergiebig - Flaschen können beliebig oft nachgefüllt werden
- Unabhängig - keine Terminvereinbarungen mit Sauerstoff-Lieferanten notwendig
- Sparsam - Flaschen sind auch mit Sauerstoff-Sparsystem PulseDose (PD1000) erhältlich

#### Drive DeVilbiss International

DeVilbiss Healthcare GmbH  
Kamenzer Straße 3  
68309 Mannheim, Germany

UK +44 (0) 121 / 521 31 40  
DE +49 (0) 621 / 1 78 98 0  
kontakt@devilbisshc.com

[www.drivedevilbiss-int.com](http://www.drivedevilbiss-int.com)